



DRUG OF ABUSE TEST  
PRUEBA DE ABUSO DE DROGAS  
Prueba para la Detección Cualitativa de Múltiples  
Fármacos en Orina  
Registro Sanitario No. 1492R2024 SSA

### Contenido

Caja con 25 Pruebas.

### Identificación de Sustancias

- Anfetamina (AMP) a 1000 ng/mL.
- Cocaína (COC) a 300 ng/mL.
- Marihuana (THC) a 50 ng/mL.
- Metanfetamina (mAMP) a 1000 ng/mL.
- Opiáceo (OPI) a 2000 ng/mL.
- Benzodiacepina (BZO) a 300 ng/mL.

### Precauciones

- **IVD**: Dispositivo Médico de diagnóstico In-Vitro.
- Para uso exclusivo de laboratorios médicos y de gabinete.
- Manténgase sellado antes de usarse.
- No se use después de su fecha de expiración.
- : No reutilizar.

### Condiciones de Almacenamiento

- Evitar exposición a luz solar directa, humedad o temperaturas extremas.
- Mantenga la muestra entre 2°C y 8°C (36°F a 46°F) si será analizada dentro de un periodo de 48 horas.
- Para almacenamiento prolongado, congele la muestra a temperaturas inferiores a -20°C. Antes del análisis, descongele la muestra y mezcle completamente.
- Almacenar en su empaque sellado a una temperatura entre 4°C y 30°C (39°F y 86°F).



# DRUG OF ABUSE TEST PANEL 6 PARÁMETROS

DM6-MDC01 AMP1000/COC300/THC50/mAMP1000/OPI2000/BZO300

### Descripción

Cles Care® - Drug of Abuse Test es un panel de detección de sustancias diseñado para pruebas de orina, disponible en versiones de 3, 5 y 6 parámetros.

Los resultados están disponibles en un intervalo de 2 a 5 minutos, con una confiabilidad superior al 98%. Es práctico y fácil de usar, sin necesidad de capacitación avanzada. Además, proporciona resultados independientes para cada parámetro detectado.


Cles Care® - Drug of Abuse Test es una solución eficiente y confiable para el entorno laboral, garantizando no solo resultados de alta calidad, sino también un respaldo integral y constante.

### Especificaciones Técnicas

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Parámetros detectados</b> | 6                                            |
| <b>Tipo de Ensayo</b>        | Immunoensayo cromatográfico de flujo lateral |
| <b>Formato del panel</b>     | Dip Card                                     |
| <b>Método de uso</b>         | Inmersión Directa                            |
| <b>Vida útil</b>             | 18 meses después de su fabricación           |
| <b>Resultados</b>            | Cualitativos                                 |


### Instrucciones de Uso

1. La muestra debe ser recolectada en un recipiente estéril, limpio y seco, (puede recolectarse en cualquier momento del día). Si presenta precipitados visibles, permita que se asienten y utilice una porción clara para el análisis.
2. Antes de iniciar el análisis, el dispositivo y la muestra deben alcanzar una temperatura ambiente de 15°C a 30°C (59°F a 86°F).

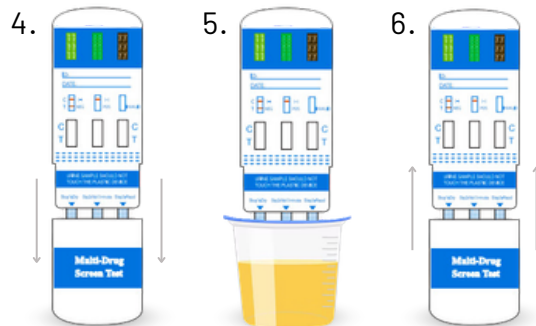

7. Disponga la tarjeta en una superficie plana, limpia y no absorbente.

### Interpretación de Resultados

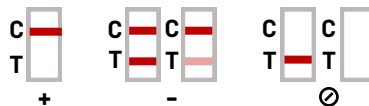

Para garantizar la validez del análisis, interprete los resultados de alcohol y adulterantes antes de 5 minutos, y los de drogas antes de 10 minutos.



Prueba de  
alcohol



Prueba de  
adulterantes



Prueba de  
drogas